

血液照射確認インジケータ

XRLABEL[®]

エックスアールラベル


X線用

特 長

- ・ X線照射により放射線感応インキが発色するタイプです。
- ・ インジケータが黄色から赤色に明瞭に変色し、照射の有無を簡単に判別できます。
- ・ 薄型のラベルタイプになっており、血液バッグへの貼付が容易です。

インジケータの変色

- ・ XRLABEL[®]は管電圧 50~150 KV、管電流5~20 mA、1~2 mmアルミニウムフィルターのX線照射によりインジケータ部が変色します。

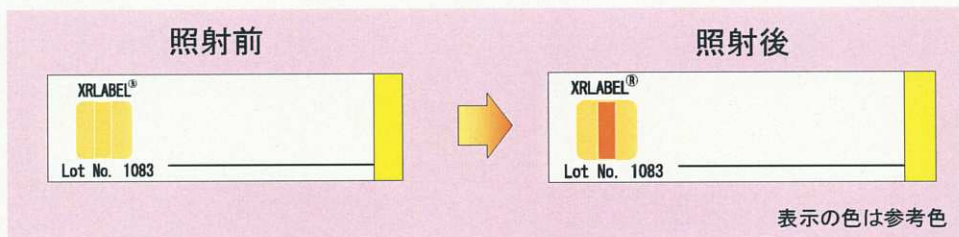

形状及び価格

- ・ サイズ : 15 × 50mm
- ・ 入 目 : 100枚/ケース
- ・ 定 価 : 13,000円 (税込み13,650円)

使用上の注意

- ・ 長時間日の当たる箇所に放置しないで下さい。
- ・ 性能保持の為冷蔵庫に保管して下さい。
- ・ 装置の校正や照射量測定には使用しないで下さい。



※外観および仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。